

Uso indicado:

El bloque de bloqueo MPS2 está diseñado para facilitar la instalación y el uso de un intercambiador de calor de convolución 10 o un intercambiador de calor de convolución 16.

Contraindicaciones:

Este dispositivo está diseñado para usarse con los desechables y la consola Quest MPS2. El uso con otros sistemas está contraindicado. Este dispositivo no se diseñó, no se vende y no se usa para ningún otro uso excepto el indicado.

Advertencias y precauciones:

1. Lea las instrucciones detenidamente. El especialista clínico a cargo solo es responsable de la instalación y el uso del dispositivo. Consulte el manual de operaciones del sistema MPS para ver las instrucciones completas de uso.
2. SOLO debe utilizarse con la consola MPS. NO LO USE para otros propósitos. Todos los reclamos son nulos si se usa por separado.
3. Desempaque los tres paquetes y compruebe que no se hayan producido daños por el transporte. NO USE componentes dañados.
4. El tomacorriente de grado hospitalario o tomacorriente hospitalario apropiado debe tener una conexión a tierra adecuada.
5. La legislación federal (estadounidense) solamente permite que un médico realice ventas o pedidos de este dispositivo.
6. Observe todas las advertencias y precauciones adicionales detalladas en las siguientes instrucciones de uso.

Para accionar hasta la posición de intercambiador de calor de convolución 16



Comience desde la posición desbloqueada 10 C.



1. Presione la perilla y gírela 360 grados en sentido contrario al de las manecillas del reloj hasta que deje de girar. (La perilla de bloqueo se extenderá hacia afuera)



2. La perilla ahora está en la posición desbloqueada de convolución 16.

(DORSO)

For symbols glossary visit www.questmedical.com/resources.aspx



One Allentown Parkway, Allen, Texas 75002 USA
+1.972.390.9800 | +1.800.627.0226 | F +1.972.390.8465

© 2019 Quest Medical, Inc. MPS is a registered trademark of Quest Medical, Inc. The MPS Console and MPS sterile disposables are covered under one or more of the following U.S. patents: 5,573,502 . 5,588,816 . 5,638,737 . 5,645,531 . 5,899,873. Also covered by pending U.S. and International Patents and patent applications.



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Made in USA
904523 REV B
JUNE 19


Para accionar hasta la posición de intercambiador de calor de convolución 10



Comience desde la posición desbloqueada 16 C.



1. Presione la perilla y gírela 60 grados en sentido de las manecillas del reloj hasta que encaje en su lugar.

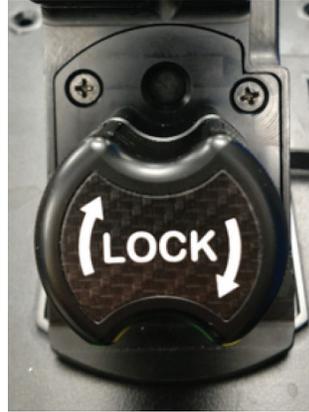

2. La muesca redondeada de las dos piezas de la perilla ahora deben estar alineadas.



3. La perilla ahora está en la posición desbloqueada de convolución 10.

- Si tiene problemas para bloquear un intercambiador de calor, asegúrese de que el bloque de bloqueo esté en la configuración correcta para el juego desechable que desee instalar.
- Consulte cómo instalar el juego desechable en las instrucciones de uso suministradas con este.
- Cuando termine de usar esta hoja de instrucciones como referencia, adjúntela a la parte posterior de su manual de operaciones de MPS en la sección de actualizaciones.
- Código del producto: 5161102 16 Convolution Delivery Set

For symbols glossary visit www.questmedical.com/resources.aspx



One Allentown Parkway, Allen, Texas 75002 USA
+1.972.390.9800 | +1.800.627.0226 | F +1.972.390.8465

© 2019 Quest Medical, Inc. MPS is a registered trademark of Quest Medical, Inc. The MPS Console and MPS sterile disposables are covered under one or more of the following U.S. patents: 5,573,502 . 5,588,816 . 5,638,737 . 5,645,531 . 5,899,873. Also covered by pending U.S. and International Patents and patent applications.



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Made in USA
904523 REV B
JUNE 19